

Effitec

FABRICANT FRANÇAIS

Effitec

¡Pídalos en línea!



Effitec OSTEOCENTRAL INTRALIGAMENTOSA
100 agujas dentales, estériles, en acero inoxidable, siliconadas, de un solo uso con bisel para inyecciones osteocentral e infiltración. ϕ 0,30 (30G) 16 mm (short)

Effitec OSTEOCENTRAL TRANSCORTICAL
100 agujas dentales, estériles, en acero inoxidable, siliconadas, de un solo uso con bisel para las inyecciones transcorticales y osteocentrales. ϕ 0,40 (27G) 16 mm (short)

Effitec TRONCULAR
100 agujas dentales, estériles, en acero inoxidable, siliconadas, de un solo uso con bisel para inyecciones troncular. ϕ 0,40 (27G) 35 mm


* Boîtes de 100 aiguilles dentaires stériles à usage unique

"Incluso las inyecciones que antes eran incómodas, como las infiltraciones palatinas y las inyecciones en la línea media superior, son completamente indoloras para nuestros pacientes. ¿Por qué debería usar otra cosa?"

mente indolora en los tejidos blandos. Gracias a un ángulo muy bajo no hay contacto con el periostio. La penetración es eficaz y sin traumatismos en el hueso. La gama contiene cuatro agujas para cubrir todas las necesidades."

Las agujas Effitec son únicas y están especialmente diseñadas para permitir una penetración completa-

Dr. A.PRYNNE - Bournemouth (Gran Bretaña)

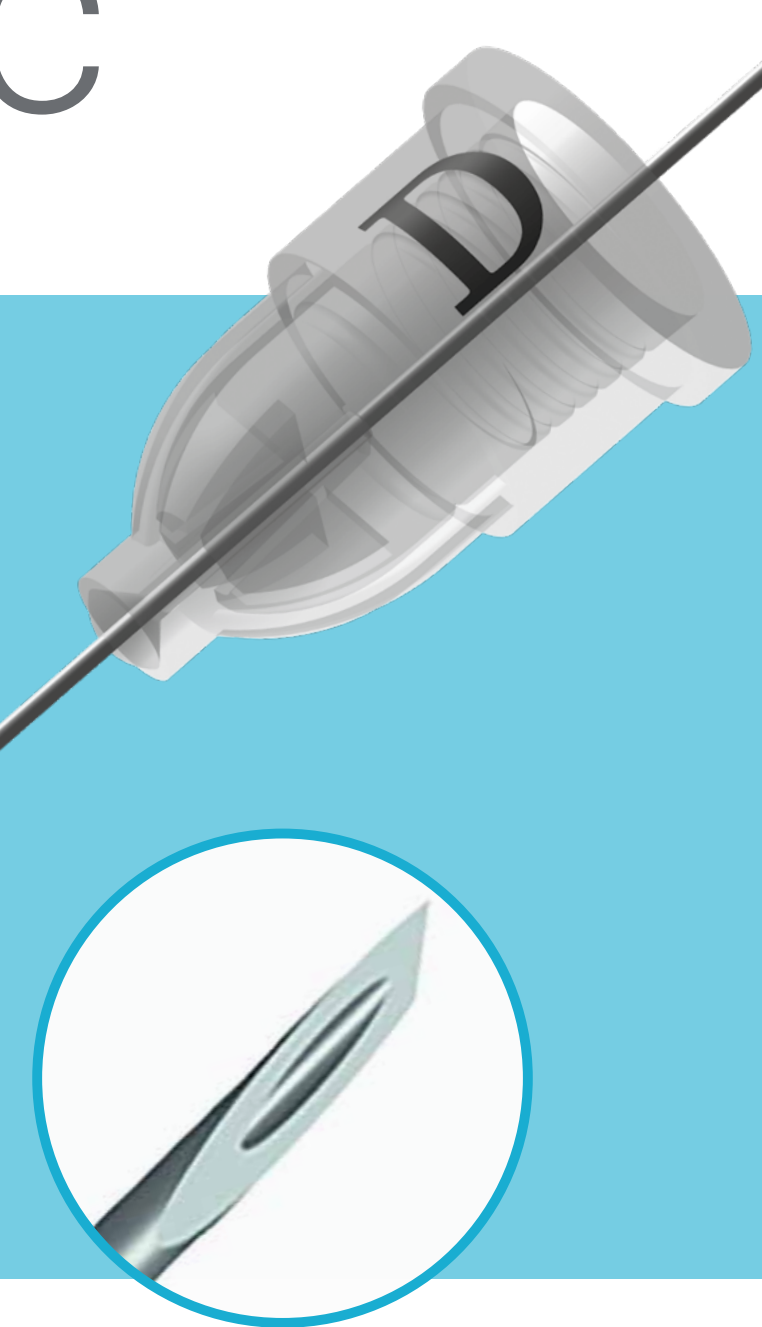

Un bisel de bisturí único para una eficiencia y comodidad garantizadas.

Dentalhitec

Les stylos d'anesthésie qui changent la vie

ZI de l'Appentière · 49280 Mazières-en-Mauges · FRANCE
+33 (0)2 41 56 41 91 · mail@dentalhitec.com



www.dentalhitec.com



Foto: DHT - El documento y las fotos no son contractuales
philippe@chaurine.net

Dentalhitec

Les stylos d'anesthésie qui changent la vie



Effitec

Por qué elegir las agujas effitec?

Su bisel de doble bisturí corta los tejidos sin desgarrarlos

- + En intraligamentaria e intraseptal, la aguja **penetra más profundamente** y **sin retorcerse**.
- + Para inyecciones en la mucosa adherida y el paladar, una marca específica e "inteligente" en la base permite orientar correctamente el bisel para una profundidad de **penetración mínima e indolora**.
- + Sus anestésicos son **más fáciles, más efectivos** y se realizan **más rápido**.
- + Agujas desarrolladas específicamente **para la anestesia osteocentral** gracias a la superficie plana del bisel.



Incisión de tejido con aguja Effitec




Desgarro de tejido con aguja estándar



La aguja hace su revolución

"Una aguja, según el uso que se le dé, participa en la producción doloroso o no después de la inyección y la anestesia exitosa. Por todo su inyecciones, el practicante se enfrenta primero al dolor de penetrar la aguja. Las agujas clásicas (bisel único) penetran en los tejidos al hacerse a un lado y así crear tensiones generadoras de dolor. El último generaciones de agujas (doble bisel) cortan el tejido, como un bisturí. Liberan tensión y, por lo tanto, son menos dolorosos."

Dr. Alain VILLETTE

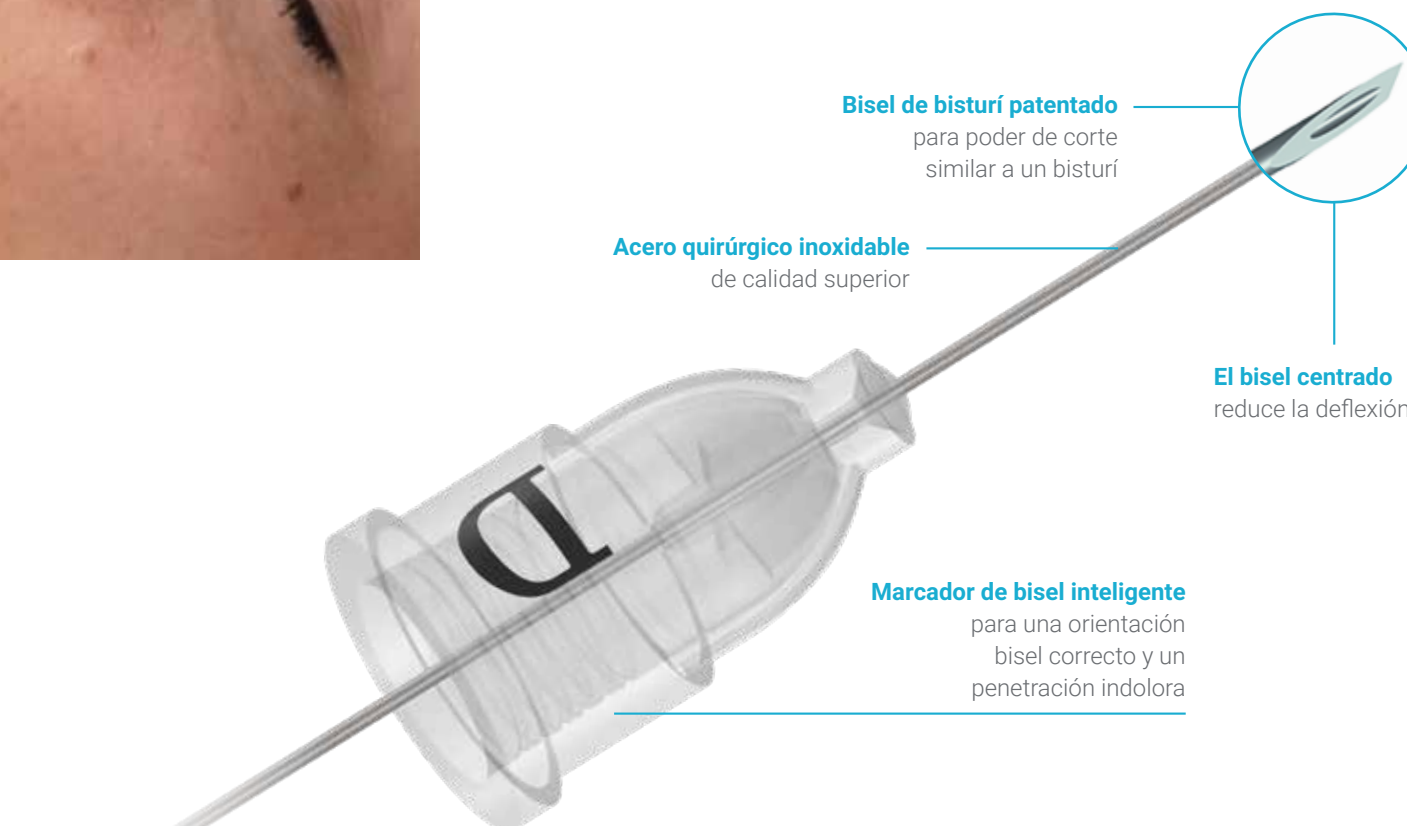

Una gama para todas las necesidades

Tipo de aguja:	30G - 16 mm	30G - 9 mm	27G - 40 mm	27G - 35 mm
Base :	Blanco	Verde	Amarillo	Gris
Paraapical	★			
Infiltración de la mucosa adherida	★	★		
Intraseptal adulto		★		
Osteocentral	★	★ (niño)	★	
Intraligamentaria		★		
Transcortical			★	
Palatino	★	★		
Troncular				★

Más información en www.dentalhitec.com



Fácil penetración e indoloro

Se hace una incisión en la mucosa moviendo menos tejido para mayor precisión, comodidad y confort



Adecuado para anestesia intraóseo

La perforación esta hecha mas facil y sin calentamiento de huesos



Compatibilidad

Las agujas Effitec son compatible con todas las jeringas en el mercado y para todas las técnicas de anestesia